

使用上のご注意

- 取り扱いにはいないにしてください。
- 水の中に落としたり、水の中で洗ったりしないでください。
- 水気や湿気を避けてお使いください。
- 洗髪したときは、よく髪を乾かしてからお使いください。
- ヘアスプレーは、補聴器をはずしてからお使いください。
- 台所や風呂場などに放置しないでください。
- 補聴器をつけたまま、風呂やサウナ風呂に入らないでください。
- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度の高いところに置かないでください。
- おやすみになるときなど、使わないときは、レバースイッチを「O」にして電源を切っておいてください。
- 耳や補聴器はいつも清潔にしておきましょう。
- 汚れは乾いた布で拭きとってください。

万一異常や不具合が起きたとき、異物が中に入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。

故障かなと思ったら

症状	チェック事項
音が出ない(音が悪い)	<ul style="list-style-type: none">電池の＋－の向きを正しく入れる。新しい電池に交換してみる。ボリュームつまみを数字の大きい方に回してみる。
ピーピー音がする	<ul style="list-style-type: none">ボリュームつまみで音量を下げてみる。耳せんが耳にしっかりおさまっているか確かめる。

保証書とアフターサービス

- 保証書
- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
 - 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
 - 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

発売元：ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

製造元：ソニー・太陽株式会社
〒879-1504 大分県速見郡日出町大字大神字寒水1402-14
承認番号 第21000BZZ00526000号

お問い合わせはお客様ご相談センターまたはソニー補聴器ご相談センターへ

お客様ご相談センター： ・東京(03)5448-3311
・名古屋(052)232-2611
・大阪(06)539-5111

ソニー補聴器ご相談センター： ・東京(03)5445-9681


主な仕様

本機は日本工業規格JIS C5512に準拠します。	
標準周波数	1600Hz
最大音響利得	60dB±5dB (入力50dB)
90dB最大出力音圧レベル	120dB (500Hz) 126dB±5dB (1600Hz) 136dB以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	38dB以下
全高調波ひずみ	8%以下 (500Hz) 9%以下 (800Hz) 6%以下 (1600Hz)
付属機能	出力制限 PLC (連続可変) 15dB ヒアリングレベル HL (2帯域独立連続可変) 80dB
使用電池の種類、電圧	ソニー空気電池PR44 (675) 型または同等品 電圧 1.4V

電池寿命	約400時間 (ソニー空気電池PR44 (675) 型使用時) 使用する電池の種類や出力により異なることがあります。
イヤホン マイクロホン 最大外形寸法	マグネチック型 エレクトレットコンデンサー型 約40.4 × 49.4 × 22.3mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約7g
付属品	耳せん受け (1) 耳せん 小(S)、中(M)、大(L)、特大(LL)各1) *お買い上げ時はイヤホンに取り付けられています。

	ソニー空気電池PR44 (675) 型 (1) オーディオアダプター (1) キャリングケース (1) キャリングポーチ (1) クリーニングクロス (1) 交換用フィルター (5) 取扱説明書 (1) 保証書 (1) ソニーご相談窓口のご案内 (1)
--	--

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

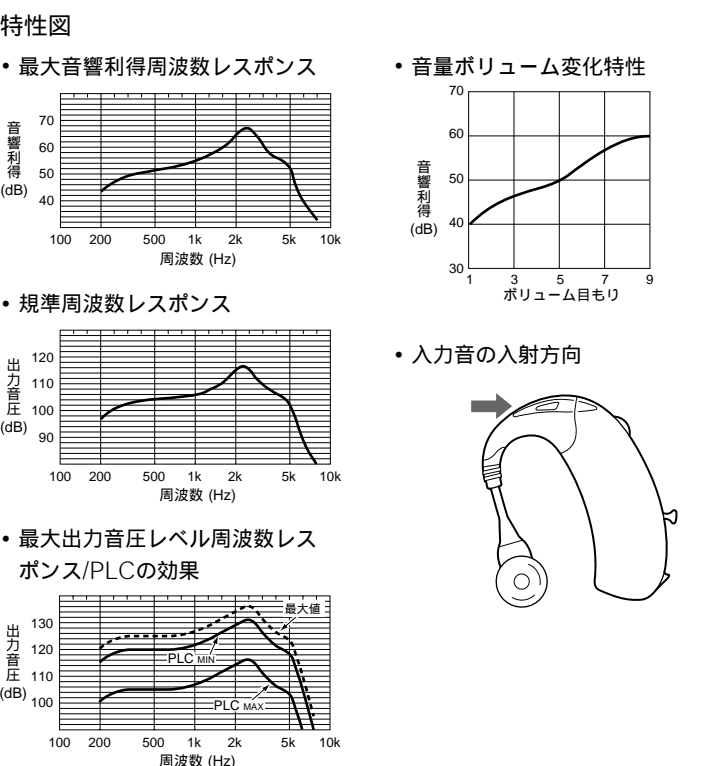


クリップの付けかた




フィルターの交換

耳せんに耳あかなどの汚れがたまったら付属のフィルターと交換してください。

1 耳せん受けをはずします。

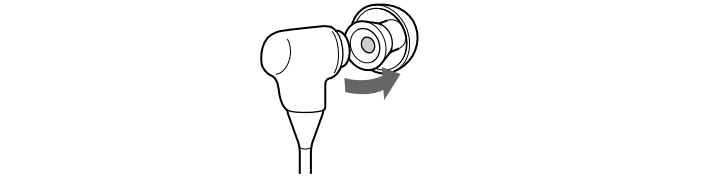

2 ピンセットなどで耳せん受けの中のフィルターを取り出し、付属のフィルターと交換します。

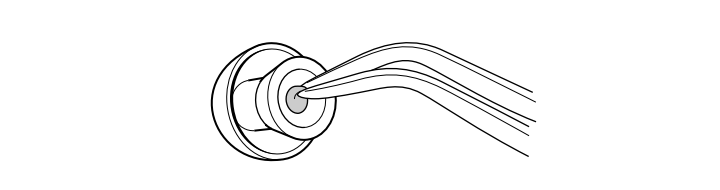

3 耳せん受けを取りつけます。

キャリングケースについて


図のように本体と予備電池をしまってください。



予備電池はケースの中で動かずしまえて便利です。


購入店での調整

下記のつまみの調節は、購入店におまかせください。お客様の聞こえ具合に合わせて調節していただけます。ボリュームつまみの目もりは「5」に合わせて調節します。具合が悪いときも購入店にご相談ください。

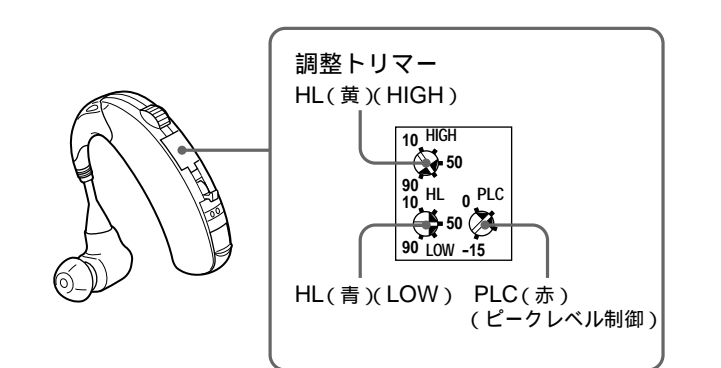


チューブの長さを調節する

1 チューブ調節ねじをゆるめます。


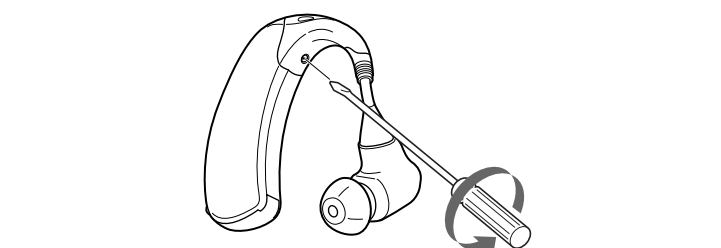


2 耳にかけ、チューブの長さを調節します。

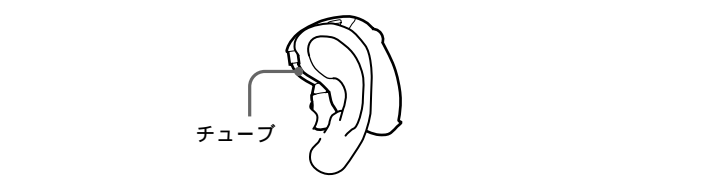


3 チューブ調節ねじを、ねじが止まるまでしめます。

4 チューブをつまんでイヤホン部を回し、耳せんの向きを耳の穴に合わせます。

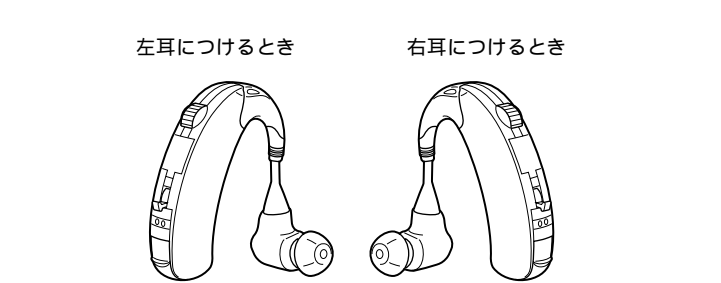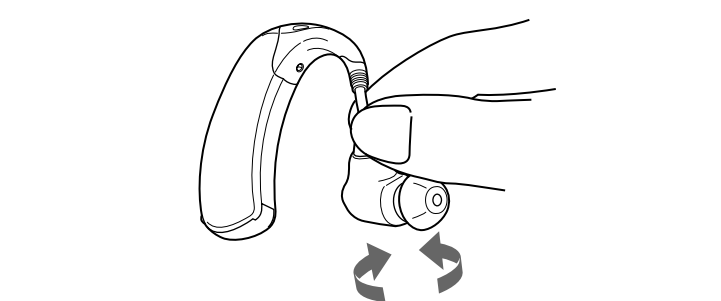

各部の名称

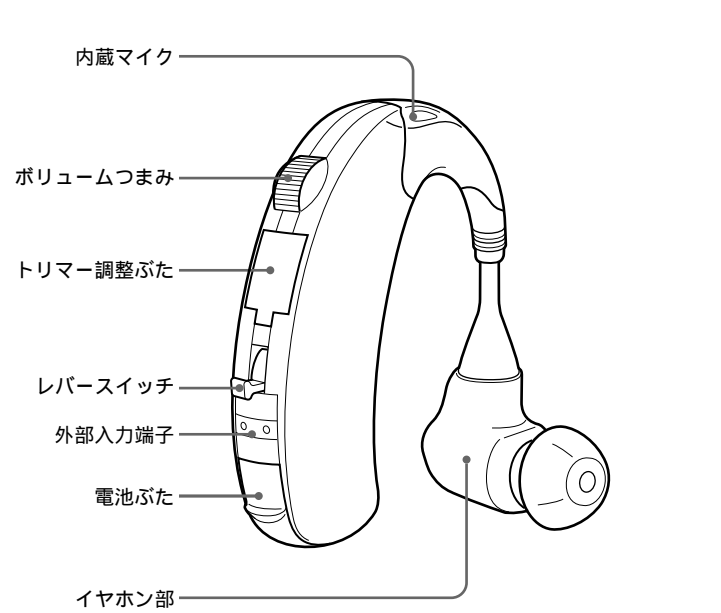

▶ Getting started

See illustration [\[1\]](#) in the Japanese text.

[A](#) Earpiece

[B](#) Audio adapter

[C](#) Sony PR44 (675) battery

[D](#) Cleaning cloth

[E](#) Carrying case

[F](#) Carrying pouch

[G](#) Spare filter

Fitting to your ear

Attaching the earpiece

If the size-M earpiece (attached at the factory) does not fit your ear, change it for one of S, L or LL sizes.

Inserting the battery

- 1 Open the battery compartment lid.
- 2 Remove the insulating sheet and insert the battery (supplied) as illustrated.
- 3 Close the battery compartment lid so that it clicks.

Battery life

The hearing aid operates for about 400 hours on the supplied Sony PR44 (675) battery.

▶ Using the hearing aid

See illustration [\[2\]](#) in the Japanese text.

- 1 Set the volume control to the “1” position.
- 2 Set the switch to the “M” position.
When you use the hearing aid in a noisy place, set it to the “S” (noise suppressing) position.
- 3 Put on the hearing aid with the earpiece fully inserted into your ear.
- 4 Adjust the volume to a moderate level.

After using
Set the switch to the “O” position.

Connecting to a TV, telephone, microphone, etc.

Using the supplied audio adapter, you can hear the sound from a TV, telephone, microphone, etc. via the hearing aid. Plug the hearing aid to the audio adapter as illustrated.

To connect to a TV or radio
Set the adapter's switch to the “LINE” position.

To connect to a microphone* or telephone
Set the adapter's switch to the “MIC” position.

* Sony ECM-A60 microphone designed for use with Sony's hearing aid is optionally available.