

超音波診断装置などの映像データを、  
USBハードディスクやファイルサーバーなどに記録することが可能な  
HD/SD対応の検査画像記録用メディカルビデオレコーダー。



## 高画質動画を記録

HD/SDに対応しているので、超音波診断装置などの画像を、高画質で記録/再生することが可能です。

※HD記録は720p

## 外部メディアに同時記録が可能

検査の終了とほぼ同時に、外部メディアへの保存が完了します。

※同時記録=内蔵HDD+1つの外部メディアへの記録となります。

## 多様な外部ストレージに接続可能

USB対応の外付けHDDまたはUSBメモリーに記録が行えます。また、後から録画データをコピーすることも可能ですので、PCで画像を編集したりするときに便利です。

※HVO-550MDは、DVD-Rにも記録可能

## 記録ファイル形式を選択可能

記録設定時に、記録したファイルの再生環境に合わせて、MP4がAVCHDを選択可能です。

- PCで再生する場合 ⇒ MP4
- 民生用再生機で再生する場合 ⇒ AVCHD


## DVO-1000MDとの高い互換性

RS-232CやUSBを経由した操作コマンドに互換性があるため、DVO-1000MDからの置き替えが容易です。

## ネットワーク経由でファイル転送

院内のネットワーク経由で、検査室からPCやサーバへ直接録画データを送信(CIFS)できますので、外部記録媒体を介さずに画像データ保管が可能です。

### ■接続構成例

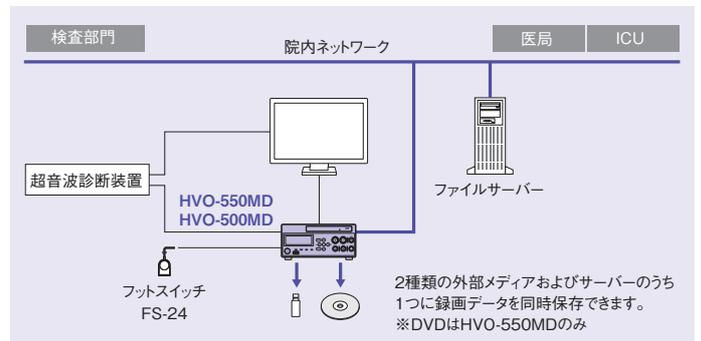

### ■記録可能時間

	HD 1280×720p			SD 720×480i / 720×576i		
	最高画質	高画質	標準	最高画質	高画質	標準
	14Mbps	8Mbps	4Mbps	5Mbps	3Mbps	2Mbps
内蔵HDD (実行容量: 400GB)	60時間15分	103時間02分	194時間17分	158時間24分	251時間11分	348時間39分
DVD-R (SL) (MP4)	0時間44分	1時間16分	2時間29分	2時間00分	3時間16分	4時間45分
DVD-R (SL) (AVCHD)	0時間40分	1時間08分	2時間09分	1時間45分	2時間46分	3時間51分
外部メディア (1TB) (MP4)	156時間33分	271時間12分	529時間51分	427時間50分	695時間44分	1012時間51分
外部メディア (1TB) (AVCHD)	141時間56分	242時間42分	457時間37分	373時間06分	591時間38分	821時間13分


●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

## ■ 主な仕様

記録装置	
内蔵ハードディスクドライブ	500GB
DVDドライブ (HVO-550MDのみ)	対応メディア: DVD-R (1層)
入力端子	
HDMI (Type A)	1
DVI-D (DVI 19ピン)	TMDS (シングルリンク)
S VIDEO (4ピンミニDIN端子)	Y: 1.0 Vp-p (75Ω) 同期負
	C (BURST): 0.286 Vp-p (75Ω) (NTSC)
	C (BURST): 0.3 Vp-p (75Ω) (PAL)
VIDEO (BNC)	コンポジット: 1.0 Vp-p (75Ω)、同期負
AUDIO (ステレオミニジャック)	1.4 Vrms (full bit)、入力インピーダンス10kΩ以上、不平衡
DC IN (DIN3ピン)	ACアダプター
出力端子	
HDMI (Type A)	1
DVI-D (DVI 19ピン)	TMDS (シングルリンク)
S VIDEO (4ピンミニDIN端子)	Y: 1.0 Vp-p (75Ω) 同期負
	C (BURST): 0.286 Vp-p (75Ω) (NTSC)
	C (BURST): 0.3 Vp-p (75Ω) (PAL)
VIDEO (BNCタイプ)	コンポジット: 1.0 Vp-p (75Ω)、同期負
AUDIO (ステレオミニジャック)	1.4 Vrms (full bit)、負荷インピーダンス10kΩ、不平衡
その他インターフェース	
USB (Type A)	USB 2.0×3
USB (Type B)	USB 2.0×1
ネットワーク (RJ-45)	1000 Base-T/100 Base-TX
REMOTE RS-232C	D-Sub 9ピン×1
REMOTE 接点スイッチ	ステレオミニジャック×2
REMOTE MONITOR	RJ-45×1
DC IN	3ピン×1
等電位端子	ネジ端子×1
安全規格・EMC	
安全規格	UL 60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1
	CAN/CSA C22.2 No.601.1、No.60601-1
	EN 60601-1
	IEC 60601-1 Second Edition、60601-1 Third Edition、IEC60065
EMC	BSMI CNS14336 (IEC60950-1) + CNS13438 (CISPR22)
	VCCIクラスB情報技術装置
	FCC、ICES003 (Digital Device Class B)
	IEC60601-1-2 Third Edition
一般	EN60601-1-2
	MSIP
	EAC (EMC-TR)
電源	DC 12~24V (AC-80MD ACアダプターから供給)
入力電流	HVO-500MD: 3.2~1.6 A
	HVO-550MD: 3.5~1.8A
動作温度	5~40°C
動作湿度	20~80% (最大湿球温度30°C、結露がないこと)
動作気圧	700~1,060hPa
保存温度	-20~+60°C
保存湿度	20~90% (最大湿球温度30°C、結露がないこと)
保存気圧	700~1,060hPa
質量	HVO-500MD: 約2.9kg
	HVO-550MD: 約3.2kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	212×105.5×287.7mm (突起部含む)
付属品	ご使用になる前に×1、CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)×1、保証書×1、ACアダプター(AC-80MD)×1、AC-80MD取扱説明書×1、セールス会社窓口のしおり×1

## ■ 外形寸法図

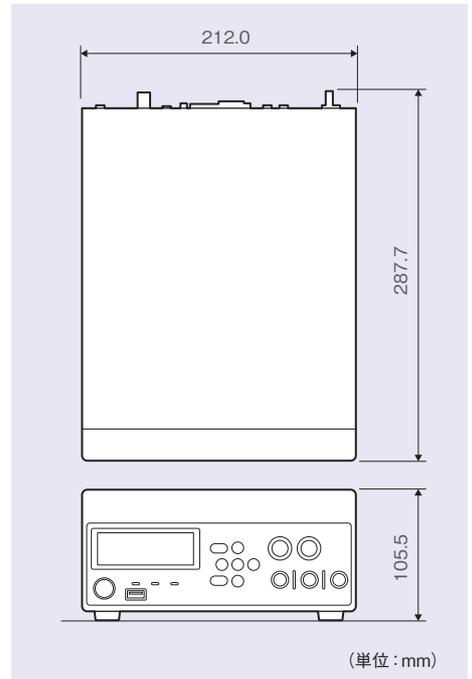

## ■ 別売アクセサリ



フットスイッチ  
**FS-24**  
 希望小売価格 7,500円+税  
 ●コード長5m

## ■ 入力解像度

1920×1080p (DVI-D/HDMI)
1680×1050p (DVI-D)
1440×900p (DVI-D)
1280×1024p (DVI-D)
1280×720p (DVI-D/HDMI)
1024×768p (DVI-D)
800×600p (DVI-D)
720×480p/576p (DVI-D/HDMI)
720×480i/576i (Video)
640×480p (DVI-D/HDMI)

## ⚠️ 安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**著作権について** ●本機を使用して映像や音声を記録したり、ネットワークなどで配信したりする場合、それらの映像、音声について著作権者の承諾が必要な場合があります。著作権保護のため、本製品をご使用の際は充分ご注意ください。詳しくは商品に添付されている「取扱説明書」をご覧ください。**録画内容の補償に関する免責事項** ●本機の不具合など何らかの原因で記録ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で記録内容が破損、消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、弊社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。詳しくは商品に添付されている「取扱説明書」をご覧ください。**HDD 内蔵機器に対する注意事項** ●本機には、HDDが搭載されています。HDDは精密部品であり、衝撃・振動・静電気・温度・湿度が原因で故障またはHDD内のデータが破損する恐れがあります。本機を設置・使用するときは、「取扱説明書」の注意事項をよくお読みのうえ、慎重に取り扱ってください。**商品取扱上の注意** ●必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失などは保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。●日本国内で使用する電源コードセットは、電気用品安全法で定める基準を満足した承認品が要求されます。ソニー推奨の電源コードセットをご使用下さい。**カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●: このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。**商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です。●Blu-ray Discおよびロゴは、商標です。●マークは、DVD-Rの統一マークです。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

[sony.jp/pro/](http://sony.jp/pro/)

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
 URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
- FAX 0120-884-707
- 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2014.4

カタログ記載内容2014年4月現在